Manuel d’instructions

VWR® SSTU

Unité de test de douche de sécurité

Numéros de catalogue européens: 139-0806



Version 1.0 Issue 09/2022

Adresse légale du fabricant

Europe
VWR International bv
Researchpark Haasrode 2020
Geldenaaksebaan 464 B-3001 Leuven
+3216385011
be.vwr.com

UK Importer
VWR International Ltd
Hunter Boulevard, Magna Park
Lutterworth, Leicestershire, LE17 4XN
uk.vwr.com

Pays d'origine

POLOGNE

Contenu

1. UTILISATION CONFORME ET INFORMATIONS IMPORTANTES POUR L'UTILISATEUR 4

2. CONTENU DE L'EMBALLAGE 4

3. APERÇU 5

4. FONCTIONNEMENT DE L'UNITÉ 5

5. ÉTIQUETTE D'IDENTIFICATION DU PRODUIT 8

6. DÉTAILS TECHNIQUES 9

7. CONDITIONS DE GARANTIE 9

8. RESPECT DES LOIS ET REGLEMENTATIONS LOCALES 10

9. ÉLIMINATION DE L'ÉQUIPEMENT 10

1. UTILISATION CONFORME ET INFORMATIONS IMPORTANTES POUR L'UTILISATEUR

Les douches d'urgence doivent être testées au moins une fois par mois pour vérifier la fonctionnalité et le débit volumétrique requis de 30 l/min. Cette unité de test mobile offre une solution extrêmement pratique et simple pour vérifier les paramètres des douches d'urgence et des lave-oeil portatifs.
Le grand entonnoir situé au centre de la douche de sécurité peut être rallongé jusqu'à une hauteur de 2,30 mètres tandis que le plus petit entonnoir est conçu pour recueillir l'eau des lave-oeil portatifs (débit min. requis 6 l/min). La quantité d'eau collectée peut être vérifiée sur l'échelle du réservoir d'eau (0L - 120 l). La pompe électrique intégrée vide le réservoir le plus rapidement possible.

2. CONTENU DE L'EMBALLAGE

SSTU est livré avec les équipements suivants :

- Réservoir d'eau en PVC transparent sur roulettes avec freins
- Pompe électrique intégrée
- Tuyau de vidange (2 m) pour vider le réservoir d'eau
- Supports séparés pour tuyau de vidange et d'alimentation
- Le grand entonnoir
- Le petit entonnoir
- Manuel d'instructions

3. APERÇU



4. FONCTIONNEMENT DE L'UNITÉ

L'unité de test de douche de sécurité est compatible avec toutes les douches d'urgence disponibles sur le marché. Lorsqu'il est placé sous la douche d'urgence, le grand entonnoir peut être ajusté à la hauteur de la pomme de douche (jusqu'à 2,3 m du sol).


Une fois l'unité de test correctement installée, la douche peut être lancée. L'eau sortante s'écoule dans le réservoir d'eau transparent où la quantité d'eau peut être mesurée sur une échelle de 0 à 120 litres. Grâce à la transparence du récipient collecteur, la qualité optique de l'eau peut également être contrôlée.

Lorsque le test est terminé, le grand entonnoir télescopique doit être ramené à sa position de départ.


L'unité de test de la douche de sécurité peut être déplacée vers un évier à proximité afin de connecter le tuyau de sortie du système de drainage et la pompe électrique à la prise électrique. Lorsque les

raccordements nécessaires sont effectués, l'unité est prête à pomper l'eau recueillie. La pompe est montée à l'intérieur du réservoir d'eau de manière à permettre d'éliminer l'eau jusqu'à 2 mm.


L'affichage de l'unité n'est pas calibré et affiche la valeur dans une plage approximative. Le testeur est composé principalement de chlorure de polyvinyle et doit être traité avec le même soin que tout autre produit en chlorure de polyvinyle.

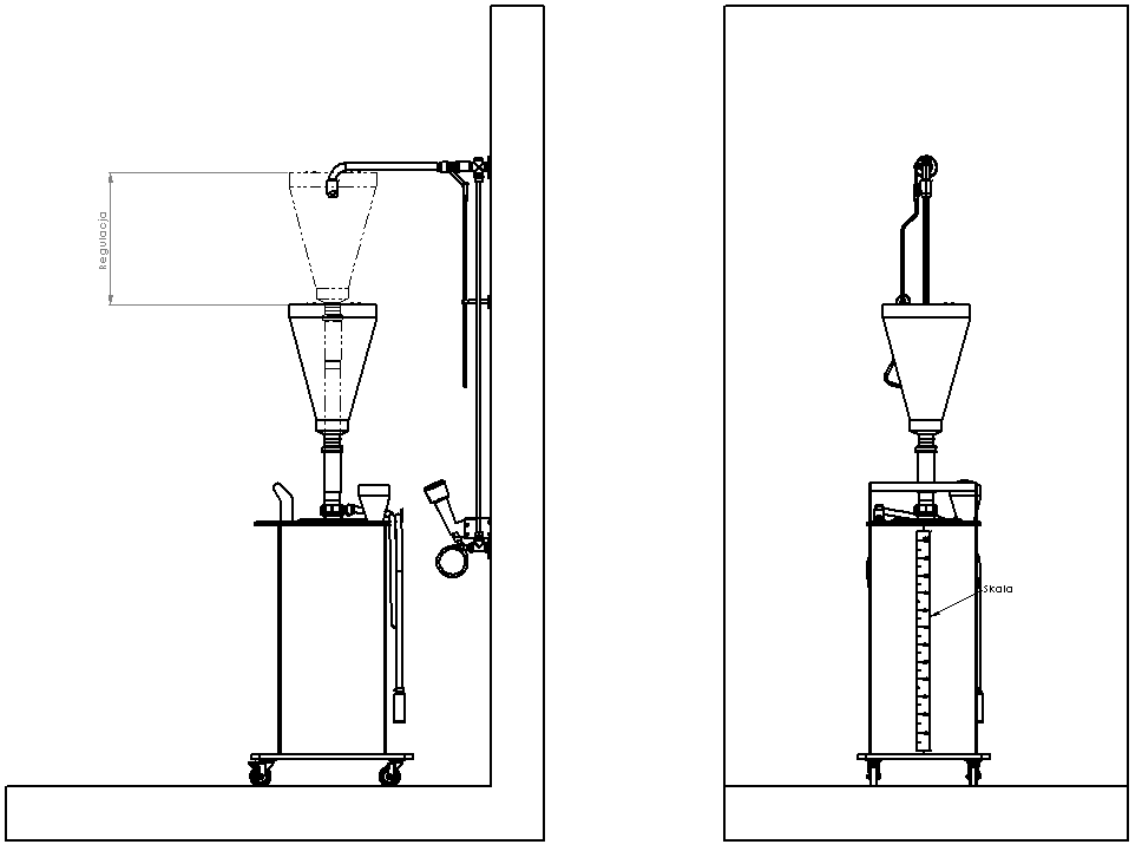

Dessin 1: Comment utiliser l'appareil

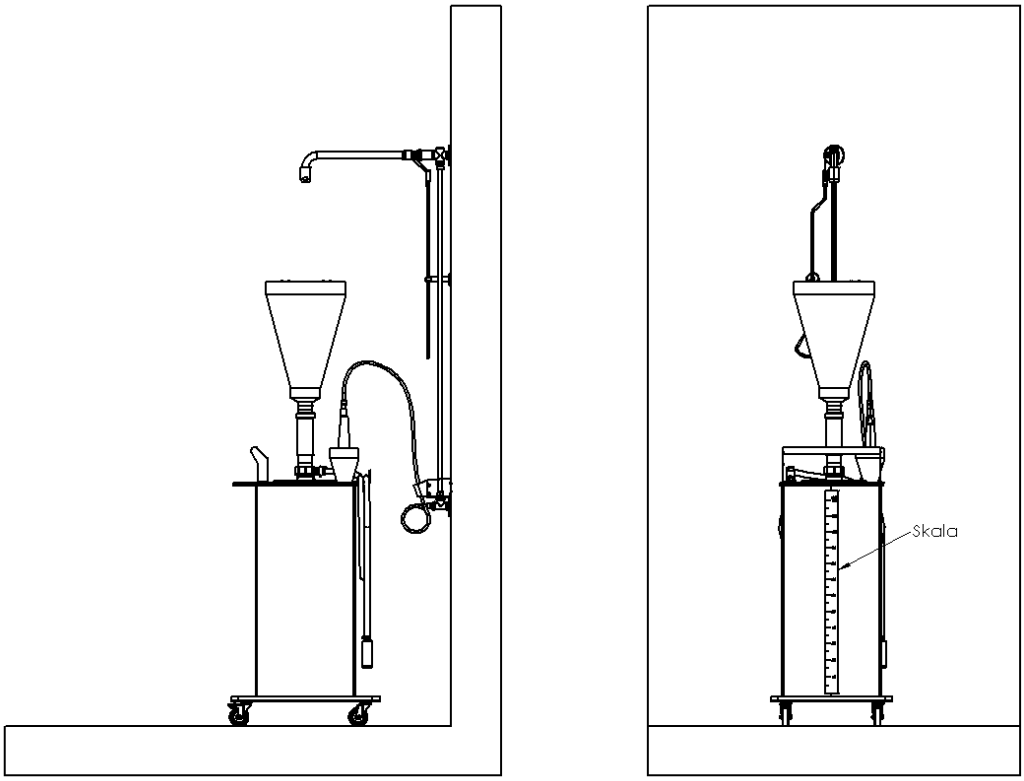

Dessin 2: Comment utiliser l'appareil

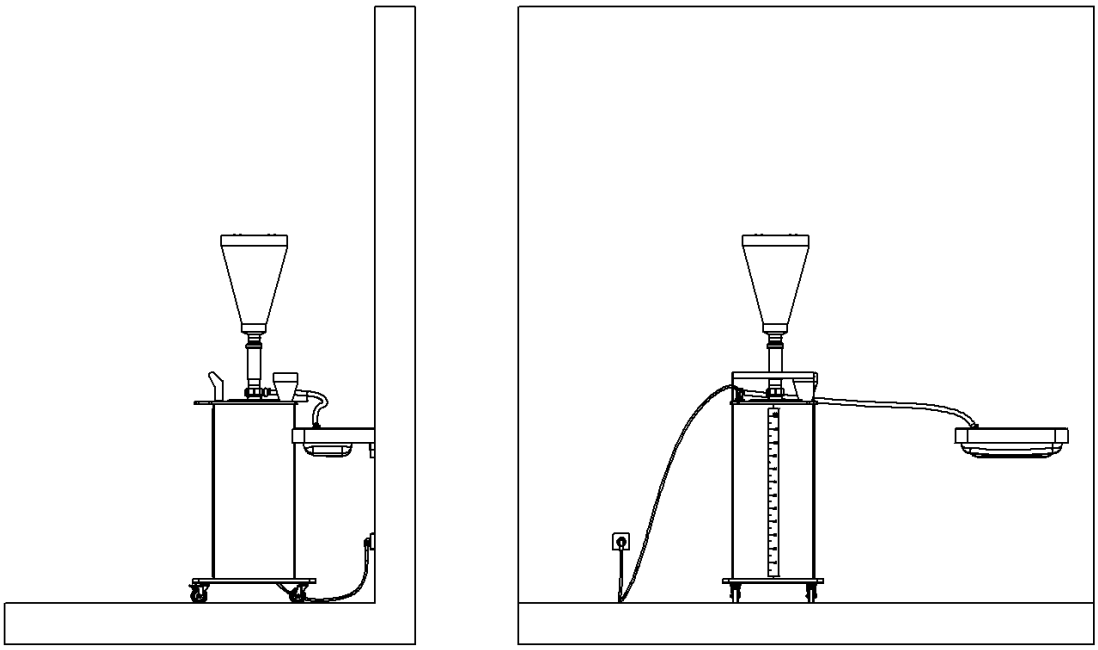


Dessin 3: Comment utiliser l'appareil

5. ÉTIQUETTE D'IDENTIFICATION DU PRODUIT

L'étiquette d'identification du produit est située dans le coin supérieur gauche.

Vous trouverez ci-dessous un exemple d'étiquette d'identification du produit :

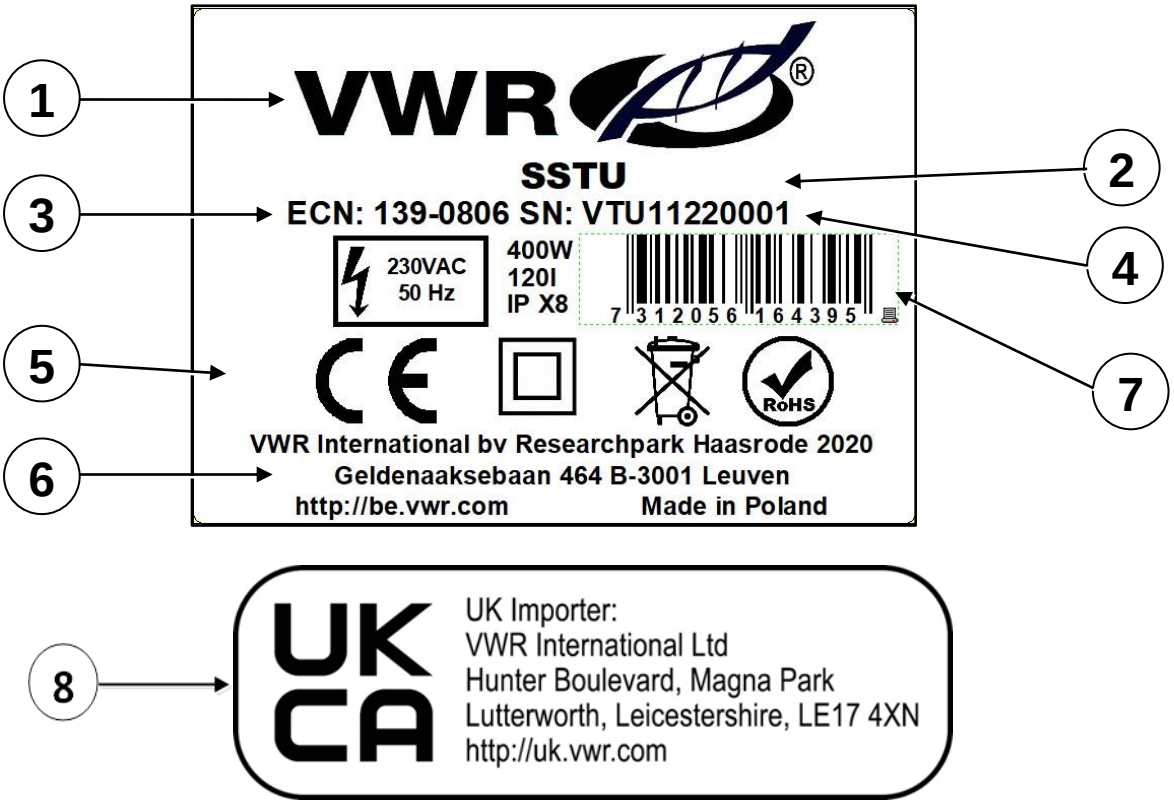

1.Logo

2. Type d'appareil

3. Numéro de catalogue

4. Numéro de série

5. Marquage CE

6. Nom et adresse du fabricant

7. Code-barres

8. Marque UKCA et importateur britannique

6. DÉTAILS TECHNIQUES

Paramètres		**SSTU**
Capacité du réservoir d'eau en PVC transparent [l]		120
L'alimentation de la pompe électrique [V]		230
Degré de protection (IP)		65
Dimensions [mm]:	Largeur	600
	Proforndeur	500
	Hauteur	1780
Diamètre de l'entrée du grand entonnoir [mm]		200
Diamètre du petit diamètre de l'entonnoir (à son point le plus large) [mm]		117
Poids [kg]		30
Collecte d'eau testée		60l/50s

7. CONDITIONS DE GARANTIE

VWR garantit que ce produit sera exempt de défauts de matériaux et de fabrication pendant une période de deux (2) ans à compter de la date de livraison. Si un défaut apparait, VWR, à ses frais, réparera, remplacera ou remboursera le prix d'achat de ce produit au client, à condition qu'il soit retourné pendant la période de garantie.

Cette garantie ne s'applique pas si le produit a été endommagé par accident, abus, mauvaise utilisation ou mauvaise application ou par l'usure normale. Si les services de maintenance et d'inspection requis ne sont pas effectués conformément aux manuels et à toute réglementation locale, cette garantie devient invalide, sauf dans la mesure où le défaut du produit n'est pas dû à cette non-exécution.

Les articles retournés doivent être assurés par le client contre d'éventuels dommages ou pertes. Cette garantie est limitée aux recours susmentionnés. IL EST EXPRESSÉMENT CONVENU QUE CETTE GARANTIE REMPLACERA TOUTES LES GARANTIES D'ADÉQUATION ET REMPLACERA LA GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE.

8. RESPECT DES LOIS ET REGLEMENTATIONS LOCALES

Le client est responsable de la demande et de l'obtention des approbations réglementaires nécessaires ou d'autres autorisations nécessaires pour faire fonctionner ou utiliser le Produit dans son environnement local. VWR ne sera pas tenu responsable de toute omission connexe ou de ne pas avoir obtenu l'approbation ou l'autorisation requise, à moins que tout refus ne soit dû à un défaut du produit.

9. ÉLIMINATION DE L'ÉQUIPEMENT



.

Cet équipement est marqué du symbole de la poubelle barrée pour indiquer que cet équipement ne doit pas être jeté avec les déchets non triés.

Il est de votre responsabilité de vous débarrasser correctement de votre équipement à la fin de son cycle de vie en le remettant à une installation autorisée pour une collecte et un recyclage séparés. Il est également de votre responsabilité de décontaminer l'équipement en cas de contamination biologique, chimique et/ou radiologique, afin de protéger des risques pour la santé les personnes impliquées dans l'élimination et le recyclage de l'équipement.

Pour plus d'informations sur l'endroit où vous pouvez déposer vos déchets d'équipement, veuillez contacter votre revendeur local auprès duquel vous avez acheté cet équipement à l'origine.

Ce faisant, vous contribuerez à conserver les ressources naturelles et environnementales et vous vous assurerez que votre équipement est recyclé d'une manière qui protège la santé humaine.

Merci!

Local VWR offices in Europe and Asia Pacific

Austria
VWR International GmbH
Graumanngasse 7
1150 Vienna
Tel.: +43 1 97 002 0
Email: info.at@vwr.com

Belgium
VWR International BV
Researchpark Haasrode 2020
Geldenaaksebaan 464
3001 Leuven
Tel.: +32 016 385 011
Email: vwr.be@vwr.com

China
VWR (Shanghai) Co., Ltd
Bld.No.1, No.3728 Jinke Rd,
Pudong New District
Shanghai, 201203- China
Tel.: +400 821 8006
Email: info_china@vwr.com

Czech Republic
VWR International s. r. o.
Veetee Business Park
Pražská 442
CZ - 281 67 Stříbrná Skalice
Tel.: +420 321 570 321
Email: info.cz@vwr.com

Denmark
VWR International A/S
Tobaksvejen 21
2860 Søborg
Tel.: +45 43 86 87 88
Email: info.dk@vwr.com

Finland
VWR International Oy
Valimotie 17-19
00380 Helsinki
Tel.: +358 9 80 45 51
Email: info.fi@vwr.com

France
VWR International S.A.S.
Immeuble Estréo
1-3 rue d'Aurion
93114 Rosny-sous-Bois cedex
Tel.: 0 825 02 30 30* (national)
Tel.: +33 (0) 1 45 14 85 00 (international)
Email: info.fr@vwr.com
* 0,18 € TTC/ min + prix appel

Germany
VWR International GmbH
Hilpertstrasse 20a
D - 64295 Darmstadt
Freecall: 0800 702 00 07
Tel.: +49 (0) 6151 3972 0 (internatio-nal)
Email: info.de@vwr.com

Hungary
VWR International Kft.
Simon László u. 4.
4034 Debrecen
Tel.: +36 (52) 521-130
Email: info.hu@vwr.com

India
VWR Lab Products Private Limited
No.139. BDA Industrial Suburb,
6th Main, Tumkur Road,
Peenya Post,
Bangalore, India – 560058
Tel.: +91-80-28078400
Email: vwr_india@vwr.com

Ireland
VWR International Ltd
Orion Business Campus
Northwest Business Park
Ballycoolin
Dublin 15
Tel.: +353 01 88 22 222
Email sales.ie@vwr.com

Italy
VWR International S.r.l.
Via San Giusto 85
20153 Milano (MI)
Tel.: +39 02-3320311/02-487791
Email: info.it@vwr.com

Korea
Avantor Performance Materials Korea Ltd
2F ACE Gwanggyo Tower I
Daehak 4ro 17
Yeongtong-gu Suwon
Korea 16226
Tel.: +82 31 645 7256
saleskorea@avantorsciences.com

Middle East & Africa
VWR International FZ-LLC
Office 203, DSP Lab Complex,
Dubai Science Park
Dubai, United Arab Emirates
Tel.: +971 4 5573271
info.mea@vwr.com

The Netherlands
VWR International B.V.
Postbus 8198
1005 AD Amsterdam
Tel.: +31 020 4808 400
Email: info.nl@vwr.com

Norway
VWR International AS
Brynsalleen 4
0667 Oslo
Tel.: +47 22 90 00 00
Email: info.no@vwr.com

Poland
VWR International Sp. z o.o.
Limbowa 5
80-175 Gdansk
Tel.: +48 058 32 38 210
Email: info.pl@vwr.com

Portugal
VWR International – Mat. de Laboratório, Soc. Unipessoal, Lda
Edifício Ramazzotti
Avenida do Forte 6, P-1.09 e P-1.10
2790-072 Carnaxide
Tel.: +351 21 3600 770
Email: info.pt@vwr.com

Singapore
VWR Singapore Pte Ltd
18 Gul Drive
Singapore 629468
Tel: +65 6505 0760
Email: sales.sg@vwr.com

Spain
VWR International Eurolab S.L.
C/ Tecnología 5-17
A-7 Llinars Park
08450 - Llinars del Vallès
Barcelona
Tel.: +34 902 222 897
Email: info.es@vwr.com

Sweden
VWR International AB
Fagerstagatan 18b
163 94 Stockholm
Tel.: +46 08 621 34 20
Email: info.se@vwr.com

Switzerland
VWR International GmbH
Lerzenstrasse 16/18
8953 Dietikon
Tel.: +41 044 745 13 13
Email: info.ch@vwr.com

UK
VWR International Ltd
Customer Service Centre
Hunter Boulevard
Magna Park
Lutterworth
Leicestershire
LE17 4XN
Tel.: +44 (0) 800 22 33 44
Email: uksales@vwr.com