
BEC ELECTRIQUE TECHNI+

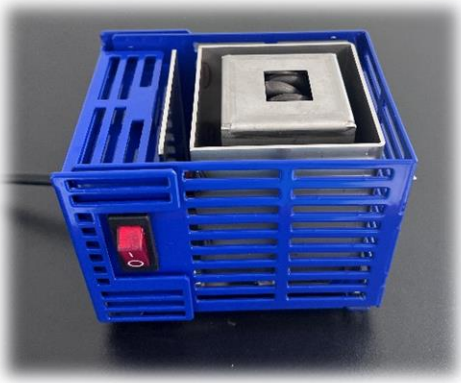

CONFORME AUX NORMES CE

Le bec électrique TECHNI+ est un appareil de chauffe pouvant se substituer au Bec Bunsen.
Il permet de stériliser vos instruments, de travailler le verre ou la réalisation de prothèses dentaires. Il est utilisable sous hotte et pour toutes les manipulations en espace stérile. L'appareil est compact et ne prend pas plus de place qu'un Bec Bunsen.

MSEI
3 rue Denis Papin – 14840 DÉMOUVILLE – France
Tél. : 02 31 82 02 02 / email : service.client@msei.tech

DESCRIPTION PRODUIT & CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

MASSE	1 KG
DIMENSIONS en mm	120 (L) x 90 (P) x 90 (H)
PUISSANCE	250 W
SECTEUR	230 V 50 Hz
PROTECTION FUSIBLE RAPIDE	2,5 A
VOYANT DE MISE SOUS TENSION	rouge

Le flux opérationnel est à 700°C et est identique à la flamme.

Les utilisateurs travaillent en sécurité sur une colonne d'air chaud.

----------Accessoires non fournis----------

NOTICE D'UTILISATION

ATTENTION : Respectez impérativement les consignes de sécurité.
Vous allez utiliser un appareil HAUTE TEMPERATURE.

PENDANT SON UTLISATION, LE CARÉNAGE EXTÉRIEUR RESTE FROID

- Poser l'appareil sur une surface stable et plane.
- Brancher l'appareil dans une prise secteur 230 V avec terre.
- Basculer l'interrupteur avec le voyant de mise sous tension rouge sur la position ON. Le voyant s'allume. L'appareil est alors en service.
- Pour éteindre l'appareil **:** remettre le bouton de réglage sur la position OFF. Le voyant rouge s'éteint. La coupure totale de l'appareil est obtenue.

MSEI
3 rue Denis Papin – 14840 DÉMOUVILLE – France
Tél. : 02 31 82 02 02 / email : service.client@msei.tech

- **TRAVAIL DU VERRE :** pour **fabriquer un râteau**, le verre de la pipette doit être coudé deux fois. Il suffit de quelques secondes pour plier la première partie. Le râteau est achevé en 15 secondes.
- **CHAUFFAGE :** la colonne d'air chaude se substituant à la flamme, il est possible d'**enflammer** une lame de verre.
- **STERILISATION :** des cols de verrerie.
- **MICROBIOLOGIE :** pour **flamber une anse de platine (öse**), entrer celle-ci au cœur de la résistance et la laisser chauffer quelques secondes : l'incandescence est alors observée.
- L'appareil produit un **espace stérile tout autour de lui sur 15 cm de diamètre.**
- L'appareil permet la chauffe des thermoplastiques et des cires pour les empreintes dentaires.
- Les apports de cire au bâton ou avec notre accessoire « la gouttière » 2203T sont possibles.
- Deux bacs à cire de trempage sont proposés (le petit bac 2202T et le grand bac 2201T) : ils chauffent la cire à la température idéale d'utilisation après 12 minutes de chauffe ; Ces bacs disposent de la position « maintien en température ».
- Le statif universel 2204T permet la fixation des accessoires.



MSEI
3 rue Denis Papin – 14840 DÉMOUVILLE – France
Tél. : 02 31 82 02 02 / email : service.client@msei.tech

EN CAS DE PANNE

Si le voyant rouge de mise sous tension ne s'allume pas :

a) Mettre le bouton de réglage sur OFF.
b) Débrancher la prise secteur.
c) Retourner complètement l'appareil.
d) Changer le fusible.
Type : fusible rapide de 2,5 A à haut pouvoir de coupure (250 V)

Après vérification du fusible, si l'appareil ne fonctionne toujours pas, prendre contact avec la société.

Si de la cire tombe sur ou dans le TECHNI+, celle-ci se consumera sans endommager l'appareil.

L'utilisateur est averti que si l'appareil est utilisé d'une façon non indiquée par le fabricant, la protection assurée par le TECHNI+ peut alors être compromise.

----------Garantie de l'appareil 3 ANS----------

MSEI
3 rue Denis Papin – 14840 DÉMOUVILLE – France
Tél. : 02 31 82 02 02 / email : service.client@msei.tech