


Seringue Luer centrée / excentrée

Seringue 3 pièces de 2 ml à 50/60 ml

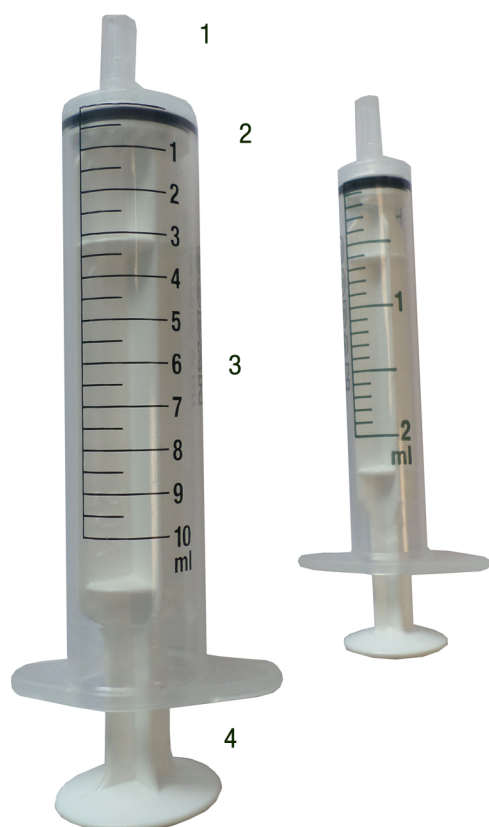

- 1 **Embout (PP)**
 - Luer centré / excentré
- 2 **Joint d'étanchéité (Silicone)**
 - Le joint en silicone noir permet un ajustement facile du dosage et une administration précise et douce d'une seule main
 - La faible surface de contact entre le médicament et l'anneau de silicone diminue le risque de contamination particulaire
- 3 **Corps de la seringue (PP)**
 - Transparent
 - 2 graduations de couleur noire pour une meilleure visibilité, quelle que soit la position de la seringue
- 4 **Piston (PP - Oxyde de Titane)**
 - Couleur blanche pour un bon contraste
 - Prise ergonomique
 - Le stop du piston évite sa sortie accidentelle

Référence	Volume	Echelle	Boîte	Carton	Embout
62.2611	2 ml	0,1 ml	100	3200	centré
62.5607	5 ml	0,2 ml	100	1600	excentré
62.6616	10 ml	0,5 ml	100	1200	excentré
62.7602	20 ml	1 ml	50	800	excentré
62.9502	30/35 ml	1 ml	35	560	excentré
62.8437	50/60 ml	1 ml	25	300	excentré

Dénomination commune : Seringue trois pièces UU

Conditionnement

- Unité d'emploi : Sachet pelable papier/polyéthylène
- Unité protégée : Boîte (voir ci-dessus)
- Unité de commande : Boîte (voir ci-dessus)
- Multiple de commande : Carton (voir ci-dessus)

Stérilisation

- Mode : Oxyde d'éthylène
- Par : CODAN
- Classification : 1s