# Guide rapide

## Premium
## Guide d'installation complet

**ECN:710-2073/710-2074**

### 1 Démarrez le PC

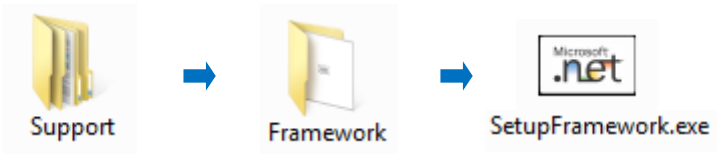
➡ Identifiez-vous comme Administrateur dans le PC et fermez tous les logiciels en cours de fonctionnement

### 2 Insérez le pilote flash USB contenant le logiciel



➡ Naviguez vers le pilote flash appelé « Logiciel » dans Windows.

### 3 Installez Microsoft.net Framework

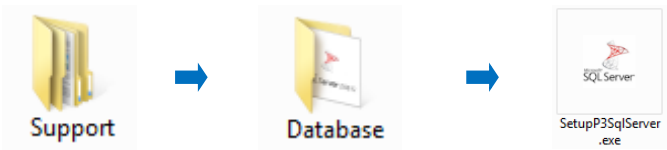



Exécutez SetupFramework.exe. Suivez les instructions indiquées à l'écran, et redémarrez le système si des mises à jour vous sont demandées. Si on vous indique que ce programme est déjà installé, passez à l'étape suivante.

### 4 Installez la base de données du serveur SQL

Le logiciel Premium nécessite la présence d'un serveur SQL de Microsoft.

Si un serveur SQL est déjà présent sur un emplacement à distance, appuyez sur OK et passez à l'étape 5, sinon, appuyez sur Annuler et passez à l'étape 4.




Exécutez SetupP3SqlServer.exe. Suivez les instructions indiquées à l'écran et choisissez le serveur SQL Server express lorsqu'on vous le demande.

### 5 Installez le logiciel Premium



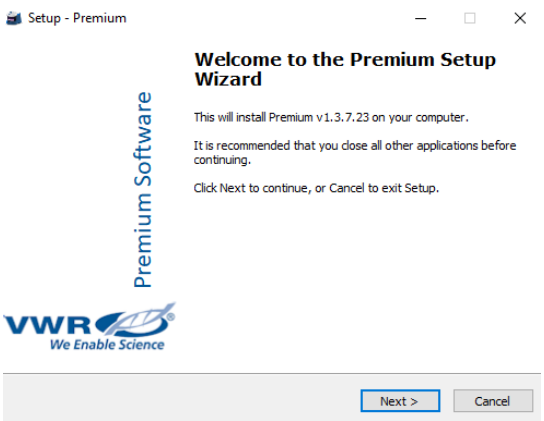

Exécutez Setup.exe. Suivez les instructions indiquées à l'écran.

## 6 Connectez Premium



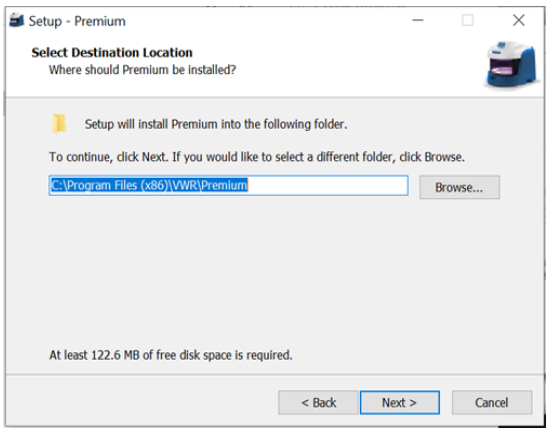
- Branchez le câble d'alimentation électrique à Premium et mettez l'unité sous tension
- Branchez le câble USB de la caméra de l'unité Premium via un port USB du PC
- Mettez Premium en marche en utilisant l'interrupteur situé sur le côté de l'unité

## 7



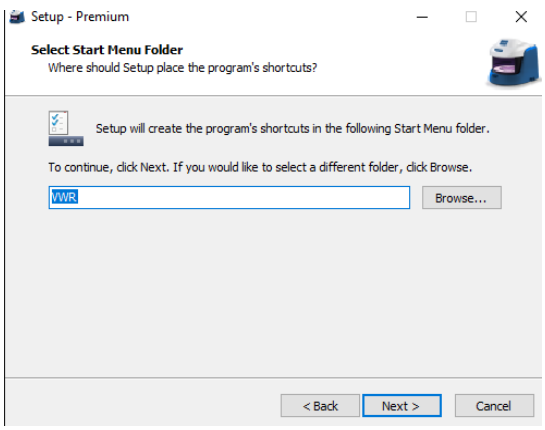

- Appuyez sur Suivant.

## 8



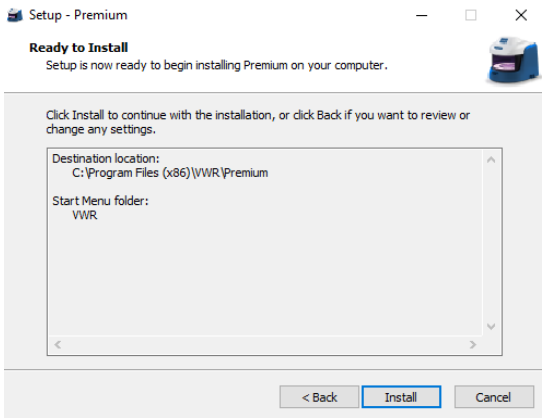

- Appuyez sur Suivant.

## 9



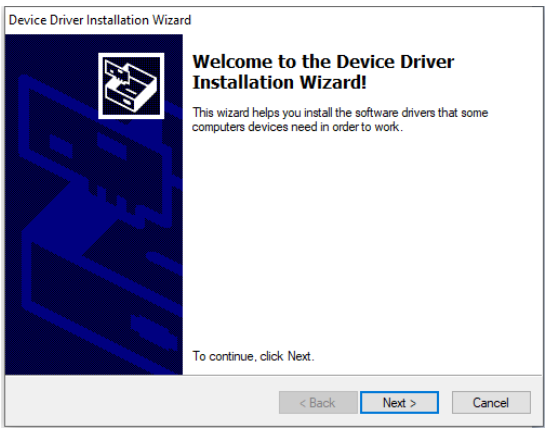

- Appuyez sur Suivant.

**10**



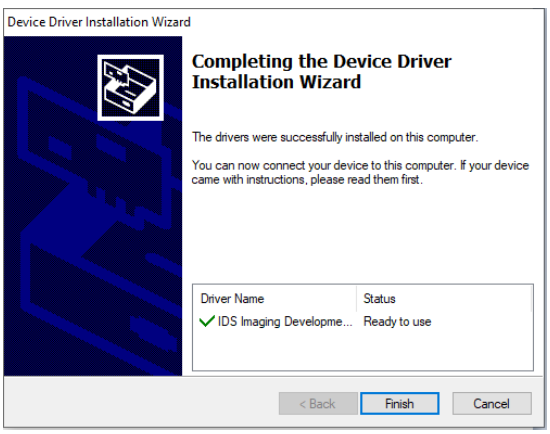

➡ Appuyez sur Installer.

**11**



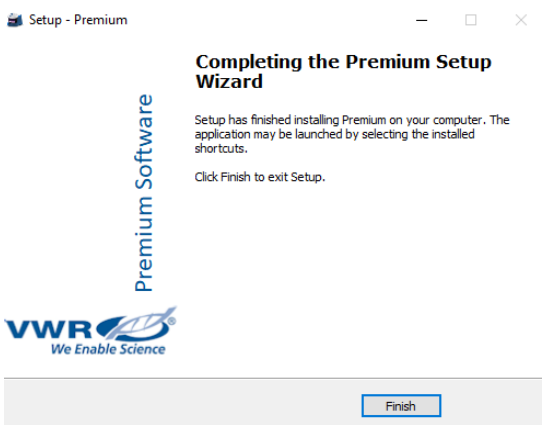

➡ Appuyez sur Suivant.

**12**



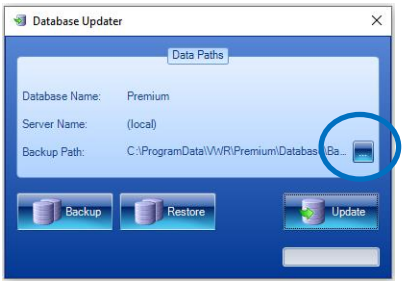

➡ Appuyez sur Suivant

**13**



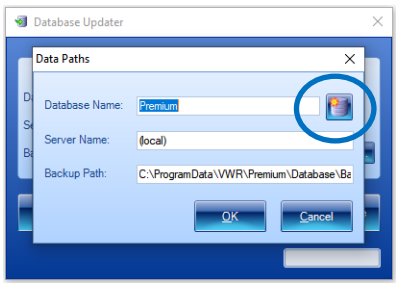

➡ Appuyez sur Terminer.

**14**




➡ L'application Updater Database apparaîtra. Si cette boîte de dialogue disparaît au bout de quelques secondes, passez à l'étape 25. Si cette boîte de dialogue reste affichée, cela signifie que la base de données n'a pas été créée. En pareil cas, appuyez sur le bouton bleu avec trois points de suspension, et passez à l'étape 22.

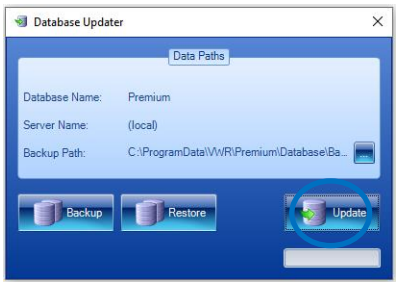
**15**




➡ La fenêtre indiquant le chemin de données apparaît. Saisissez un nom pour nommer la base de données (Premium DB).

➡ Appuyez sur le bouton Nouvelle base de données (à droite du Nom de la base de données). Vous verrez apparaître le message « Base de données créée avec succès », appuyez sur OK, puis appuyez de nouveau sur OK dans la fenêtre du Chemin des données.

**16**




➡ Appuyez sur le bouton Mise à jour. Si des mises à jour sont nécessaires, elles seront effectuées, et la boîte de dialogue se fermera.

**17** **Ajouter des utilisateurs aux groupes d'utilisateurs**

➡ Voir le Guide rapide – « *Ajouter un utilisateur* » constitue une étape importante, et l'appareil ne fonctionnera pas correctement tant que les utilisateurs n'auront pas été installés.

**18** **Exécuter le logiciel Premium** ➡ Identifiez-vous dans le logiciel et assurez-vous que les voyants sont Rouge, Bleu et Vert. Cliquez sur l'onglet image et sélectionnez Image en direct afin de vous assurer que la caméra prend bien des images




**Premium est à présent prêt à être utilisé**