FR– Mode d'emploi

Solvant Q Path® Clean Lab

CE IVD

PRODUITS APPLICABLES

QTY REF

Description	Format d'emballage	Catégorie Numéro
Clean Lab Q Path®	100 ml	**10047400**

USAGE PRÉVU

On utilise ce produit en tant que substitut de solvant en vue d'examiner des échantillons prélevés sur l'organisme humain. Ce produit doit exclusivement être utilisé pour procéder à des examens de diagnostic in-vitro, et il permet de préparer des analyses diagnostiques. Il est prévu pour être utilisé dans un laboratoire avec des professionnels de santé. La population de patients à laquelle ce produit est destiné est constituée par des patients humains qui ont besoin de ce type d'examen.

COMPOSITION

Le produit est constitué d'hydrocarbures (> 80 %).

PRINCIPE DE BASE

Le Q Path® Clean Lab facilite l'élimination de la cire des instruments, appareils de mesure et système automatiques. Son principe de base repose sur la réaction physico-chimique en jeu dans les molécules que contiennent le Q Path® Clean Lab, lesquelles interagissent avec les molécules d'eau contenues dans la paraffine.

RESTRICTIONS D'UTILISATION

Pour connaître exactement les conditions d'utilisation et les méthodes d'entretien, respectez les recommandations du fabricant des appareils automatiques ou des appareils de mesure.

ÉCHANTILLONS


Non applicable.

PRÉPARATION DU RÉACTIF

Ce réactif est prêt à l'emploi, et on peut le prélever directement de son récipient ; aucune préparation spécifique du réactif n'est nécessaire.

CONDITIONS DE STOCKAGE ET DURÉE DE CONSERVATION

Le flacon de produit doit être bien refermé après usage et conservé debout, à l'abri de la lumière directe, et dans un lieu bien ventilé.

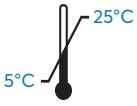

Ne pas utiliser ce réactif au-delà de la date de péremption imprimée sur l'étiquette.

APPLICATION

1. Retirez le bouchon de protection du flacon vaporisateur.
2. Vaporisez la surface à traiter en exerçant une simple pression sur la pompe.
3. Lorsqu'on procède à la vaporisation, maintenir une distance de 15 à 20 cm entre le flacon et la surface qui doit être traitée.
4. Ensuite, essuyez la surface à l'aide d'un chiffon doux afin de la sécher surface et d'en éliminer les résidus de paraffine.
5. Éliminez les résidus de paraffine, et placez la surface dans un récipient approprié.
6. Après utilisation, remettre le bouchon de protection sur le flacon.

MISE AU REBUT

Éliminez conformément aux lois et réglementations en vigueur.

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS

	H226 : Liquide et vapeurs inflammables.
	H304 : Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
	EUH066 : L'exposition répétée peut provoquer dessèchement et gerçures de la peau.
CONSEILS DE PRUDENCE	P210 : Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
	P243 : Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
	P280 : Porter des gants de protection/des vêtements de protection/ un équipement de protection des yeux/du visage.
RÉPONSE	P301+P330+P331 : EN CAS D'INGESTION : Rincer la bouche. Ne pas provoquer de vomissements.
	P308+P310 : EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée : Appelez un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
	P403+P235 : Stockez dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
	À usage unique exclusivement. Jetez le produit après l'usage.

1. Ne pas vaporiser directement les interrupteurs et les contacts électriques d'une pièce d'appareil.
2. Ne pas vaporiser à proximité d'une source de chaleur.

Pour obtenir de plus amples informations, veuillez vous reporter à la fiche de données de sécurité.

VWR International S.A.S., Immeuble Estréo, 1-3 rue d'Aurion, 93114 ROSNY-SOUS-BOIS CEDEX, France,+33(0)1 45 14 85 00, avantorsciences.com

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ

Nous accordons une attention toute particulière à la qualité de vos produits. Si l'un de nos produits venait à dysfonctionner, et si vous n'en étiez pas satisfait, veuillez remplir le formulaire de réclamation situé sur la page Contact de votre site web local **vwr.com** et indiquez la référence et le numéro de lot du produit concerné.

Nous attirons l'attention des utilisateurs sur les risques possibles en lien avec une utilisation du produit autres que les fins auxquelles il est destiné. Le mode d'emploi ne dispense pas l'utilisateur de connaître et d'appliquer l'ensemble des informations qui réglementent son activité. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de prendre les précautions nécessaires relatives à l'utilisation qu'il fait de ce produit.

SYMBOLES UTILISÉS

Symbole	Titre et description du symbole
	Marquage de conformité CE
	Référence catalogue
	Fragile, à manipuler avec soin
	Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé
	Consultez la notice d'utilisation
	À utiliser avant

Symbole	Titre et description du symbole
	Dispositif médical pour diagnostic in vitro
	Quantité de produit dans la boîte
	Fabricant
	Identification unique du produit
	Date de fabrication
	Code de lot

Symbole	Titre et description du symbole
	Ne pas réutiliser
	Attention
	Limite de température
	Fabriqué en Pologne
	À conserver au sec
	À protéger des rayons du soleil

JOURNAL DES MODIFICATIONS

Cette notice d'utilisation a été élaborée en mai/juin 2023 et remplace l'ensemble des notices précédentes. Ces informations se basent sur nos connaissances et notre expérience actuelles.

Version 06

Modifications portant sur la version la plus récente de l'IFU :

- Mise à jour globale de la mise en page
- Corrections mineures et clarifications

CONTACT

VWR International S.A.S.
Immeuble Estréo
1-3 rue d'Aurion, 93114 ROSNY-SOUS-BOIS CEDEX, France
SRN : FR-MF-000016509
+33(0)1 45 14 85 00
info.fr@vwr.com
www.avantorsciences.com

Tout incident grave qui serait survenu en lien avec ce produit doit être signalé au fabricant et aux autorités compétentes de l'État-Membre où l'utilisateur et/ou le patient réside.