
PROFILLETTE™ 406

OPERATING INSTRUCTIONS
BETRIEBSANWEISUNG
MODE D'EMPLOI

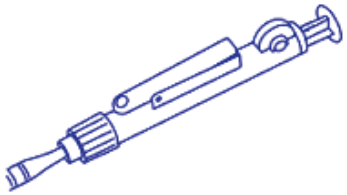

SAFETY PRECAUTIONS

Observe manufacturer's recommendations. Refer to and follow regulations about handling of potentially hazardous reagents.

SICHERHEITSANWEISUNGEN

Empfehlungen des Herstellers beachten. Vorschriften über Handhabung von möglichen gefährlichen Reagenzien befolgen.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Respecter les consignes d'utilisation. Connaître et suivre les règles de sécurité concernant l'emploi de réactifs dangereux.

OPERATION

Carefully insert pipette into silicone holder. Hold Profillette™ in vertical position and rotate wheel to aspirate. Stop at slightly higher level than required volume; then adjust precisely. To release drop by drop, turn wheel. Press side lever for fast release.

INBETRIEBNAHME

Pipette vorsichtig, in Pipettenhalter einfügen. Ansaugen: Profillette™ vertikal halten, Rädchen drehen. Mehr Flüssigkeit als benötigtes Volumen aufsaugen; danach abgleichen. Rasche Abgabe durch Pressen des Auslassventils; oder schrittweise durch Drehung des Rädchens.

UTILISATION

Insérer gentiment la pipette dans porte-pipette. Tenir la Profillette™ verticalement, tourner la molette pour aspirer. Dépasser légèrement le volume désiré, puis ajuster exactement. Tourner la molette pour distribuer au compte-goutte. Ecoulement rapide en pressant sur la soupape.

MAINTENANCE

Do not allow liquid to enter the Profillette™. Instrument is not autoclavable.

INSTANDHALTUNG

Keine Flüssigkeit in die Profillette™ aufsaugen. Das Instrument ist nicht autoklavierbar.

ENTRETIEN

Ne pas aspirer de liquide à l'intérieur de la Profillette™. L'instrument n'est pas autoclavable.

ORDERING INFORMATION

Profillette™ 406	Colours	Packaging	Cat. No.
Fits pipettes up to 2 mL	blue	1/pk	406.002
Fits pipettes up to 10 mL	green	1/pk	406.010
Fits pipettes up to 25 mL	red	1/pk	406.025

BESTELLINFORMATION

Description	Packaging	Cat. No.
Set of Profillette 2/10/25 mL	3/pk	406.300
Spare silicone pipette holder	1/pk	1.406.01
Replacement nose screw	1/pk	1.406.02

CATALOGUE

I.406.P – B 519

SOCOREX SWISS
SOCOREX ISBA S.A. – CH. CHAMP-COLOMB 7A – CH-1024 ECUBLENS/LAUSANNE – SWITZERLAND
socorex@socorex.com – www.socorex.com – TEL. +41 21 651 60 00

Accredited calibration laboratory ISO / IEC 17025
ISO 9001 / ISO 13485