FR – Mode d'emploi

Milieux de montage Q Path®

CE IVD

PRODUITS CONCERNÉS

QTY REF

Description	Format d'emballage	Catégorie Article
CTO pour tissus Q PATH®	125 ml	**00411243**

USAGE PRÉVU

On utilise ce produit en tant que milieu de montage en vue d'examiner des échantillons prélevés sur l'organisme humain. Ce produit doit exclusivement être utilisé pour procéder à des examens histologiques, et il permet de préparer des analyses diagnostiques. Il est prévu pour être utilisé uniquement dans un laboratoire par des professionnels de santé. La population de patients à laquelle ce produit est destiné est constituée de patients humains qui ont besoin de ce type d'examen.

COMPOSITION

Le produit est constitué de polyéthylène glycol.

PRINCIPE DE BASE

Ce produit est une colle soluble dans l'eau, destinée à servir de revêtement à l'ensemble des types de tissus d'origine humaine sur la lame avant congélation, et, également, en vue de la fixation dans le cryostat ou sur le microtome extemporané. On l'utilise pour procéder à des sections extemporanées à froid.

Ce produit permet de coller l'échantillon sur la lame et de recouvrir les sections congelées. Cette réaction est de nature physique ; le produit durcit au contact de l'air et du froid afin de faire adhérer l'échantillon. Afin de tirer parti au mieux de ses performances, ce produit ne doit pas être utilisé dilué, ni avec des additifs.

RESTRICTIONS D'UTILISATION

Pour connaître les limites de performances, il faut tenir compte de la technique utilisée.

ÉCHANTILLONS

On part du principe que ce produit doit être utilisé avec des échantillons permettant d'analyser des prélèvements histologiques obtenus via une procédure microchirurgicale, ou bien des sections macroscopiques.

- État spécifique des échantillons : échantillons frais.
- Prétraitement : Aucun.
- Conditions de stockage : Conserver au congélateur.

PRÉPARATION DU RÉACTIF


Ce réactif est prêt à l'emploi et on peut le prélever directement de son récipient. Le réactif n'a pas besoin de faire l'objet d'une préparation spécifique.

MATÉRIEL SPÉCIAL NÉCESSAIRE MAIS NON FOURNI

- Cryostat
- Microtome extemporané

CONDITIONS DE STOCKAGE ET DURÉE DE CONSERVATION

Le flacon du produit doit être bien refermé après usage et conservé debout, à l'abri de la lumière directe, et dans un lieu bien ventilé. La date de péremption doit être clairement indiquée sur l'emballage.

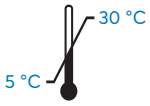

Ne pas utiliser ce réactif au-delà de la date de péremption imprimée sur l'étiquette.

APPLICATION

1. Pour utiliser le produit, il suffit de presser le flacon.
2. Enduire l'échantillon et le fixer sur la lame.
3. Réalisez la section en respectant les recommandations une fois que le tout a été congelé.

MISE AU REBUT

Disposer des déchets conformément aux lois et réglementations en vigueur.

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS

Cette substance n'a pas été classée parmi les produits dangereux, dans le respect de la règlementation en vigueur.



À usage unique exclusivement.
Jetez le produit après l'usage.

1. Bien refermer le bouchon après utilisation.
2. Ne pas diluer ou mélanger le produit.

Pour obtenir de plus amples informations, veuillez-vous reporter à la fiche de données de sécurité.

1 VWR International S.A.S., Immeuble Estréo, 1-3 rue d'Aurion, 93114 ROSNY-SOUS-BOIS CEDEX, France, +33(0)1 45 14 85 00, www.avantorsciences.com

SYMBOLES UTILISÉS

Symbole	Titre et description du symbole
CE	Marquage de conformité CE
REF	Référence catalogue
	Fragile, à manipuler avec soin
	Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé
	Consulter la notice d'utilisation
	À utiliser avant

Symbole	Titre et description du symbole
IVD	Dispositif médical pour diagnostic in vitro
QTY	Quantité de produit dans la boîte
	Fabricant
UDI	Identification unique du produit
	Date de fabrication
LOT	Code de lot

Symbole	Titre et description du symbole
	Ne pas réutiliser
	Attention
	Limite de température
	Fabriqué en Pologne
	À conserver au sec
	À protéger des rayons du soleil

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ

Nous accordons une attention toute particulière à la qualité de nos produits. Si l'un de nos produits venait à dysfonctionner, ou si vous n'en étiez pas satisfait, veuillez remplir le formulaire de réclamation situé sur la page Contact de votre site web local **vwr.com** et indiquez la référence et le numéro de lot du produit concerné.

Nous attirons l'attention des utilisateurs sur les risques possibles en lien avec une utilisation du produit autre que les fins auxquelles il est destiné. Le mode d'emploi ne dispense pas l'utilisateur de connaître et d'appliquer l'ensemble des informations qui réglementent son activité. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de prendre les précautions nécessaires relatives à l'utilisation qu'il fait de ce produit.

JOURNAL DES MODIFICATIONS

Cette notice d'utilisation a été élaborée en juin 2023 et annule l'ensemble des notices précédentes. Ces informations se basent sur nos connaissances et notre expérience actuelles.

VERSION 06

Modifications portant sur la version la plus récente de l'IFU :

- Mise à jour globale de la mise en page
- Corrections mineures et clarifications

CONTACT

VWR International S.A.S.
Immeuble Estréo
1-3 rue d'Aurion, 93114 ROSNY-SOUS-BOIS CEDEX, France
SRN : FR-MF-000016509
+33(0)1 45 14 85 00
info.fr@vwr.com
www.avantorsciences.com

Tout incident grave qui serait survenu en lien avec ce produit doit être signalé au fabricant et aux autorités compétentes de l'État-Membre où l'utilisateur et/ou le patient réside.

01/2025-SM-CP
IHA-467187-25-FR