

[illegible]


47

No formule	Vers	Util.	Ligne	Article	Libelle	Quantite	Unit	Niv	Cl	alloc	Lct
08600427	0	0	1	08600427	NOIX LABOMECA DE 8X12 EN ZAMAK-	1.000	UN	1	FIFO/M		1
		0	1	P7974202	CORPS NOIX ZAMAK 8X12-PL.D 50077 USI NE-NICKELE	10.000	UN	-1	FIFO/M		1
		0	2	P7974221	COUVERCLE R6 NOIX 8X12-PL.C 50079 NI CKELE	10.000	UN	-1	FIFO/M		1
		0	3	P7974222	COUVERCLE D8 NOIX 8X12-PL.C 50080 NI CKELE	10.000	UN	-1	FIFO/M		1
		0	4	P7324962	VIS INOX CHC M.5 X 12-	20.000	UN	-1	FIFO/M		1
		0	5	E8726320	CARTON FA GC 30KG 300X200X200-	.100	UN	-1	FIFO/M		1
		0	6	E8014580	SAC POLYETHYLENE-BP.10/100EME-DE 160 X290 M/M	1.000	UN	-1	FIFO/M		1
		0	7	PEX02153	MONT.CONDIT. NOIX 12X8-CODE 08600427 (x10) FAM.19	10.000	UN	-1	FIFO/M		1


VWR International S.A.S.
VWR, Part of Avantor
Z.I. de Vaugereau
F-45250 BRIARE

D 50077


USINAGE :
2 M5 Taraudage par refoulement de matière

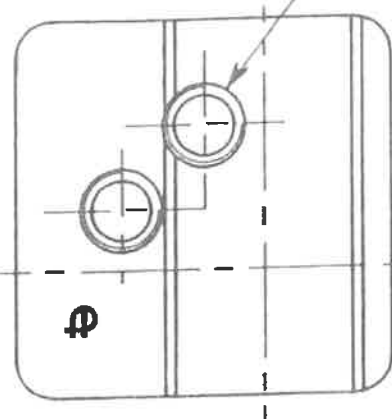



éjecteur $\phi 3$
en creux de 0 -0.3

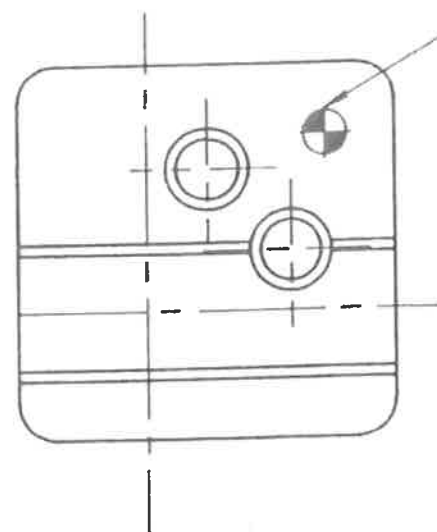

COUPE B-B

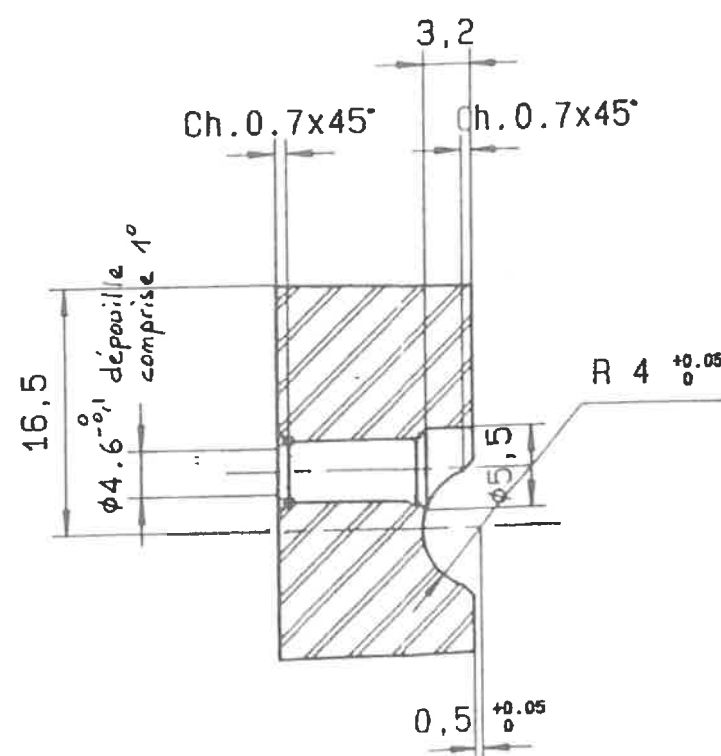


COUPE A-A

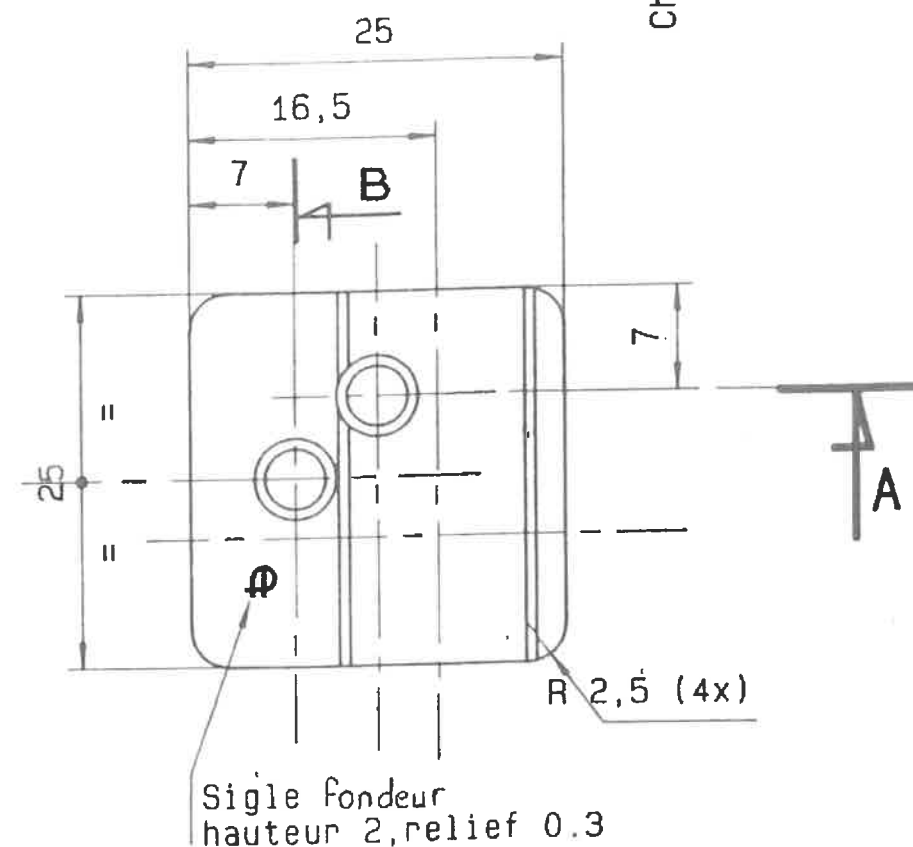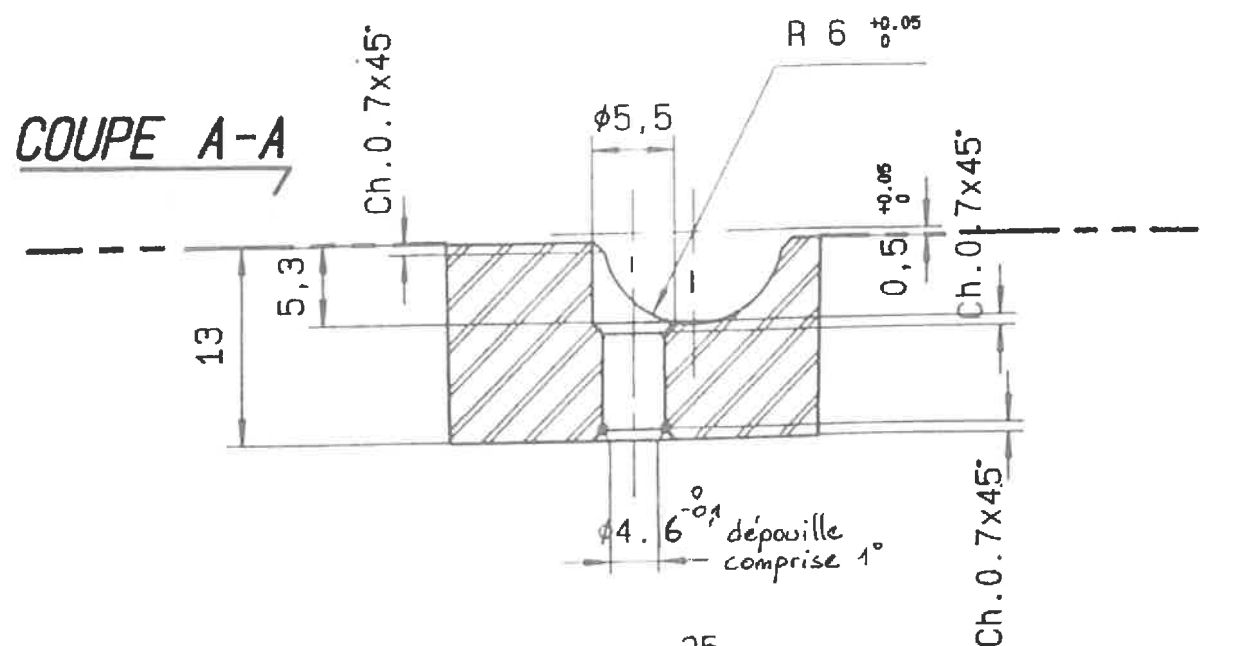

D/ PLAN REFAIT: Ajoute usinage de 2M5 - ANNULE PL A50078- LE 25.04.94 EK			
Modif.: $\phi 4,1/4,2$ deviennent $\phi 4,6-8,1$ dépouille comprise.			
Protec.: NICKELAGE BRILLANT		Tol. Gle.: j13 J13	
Matière: ZA4G (ZAMAK)		code: P	
CORPS DE 8X12 NOIX DE 8X12		Les dispositifs, objet de ce dessin sont protégés par les lois relatives à la propriété industrielle.	
VWR International S.A.S. VWR, Part of Avantor Z.I. de Vaugereau F-45250 BRIARE		Dessiné: KOUTCHENKOFF	
		Contrôle: 25.04.94	
		Code: P7974202	
		D 50077	

C 50080

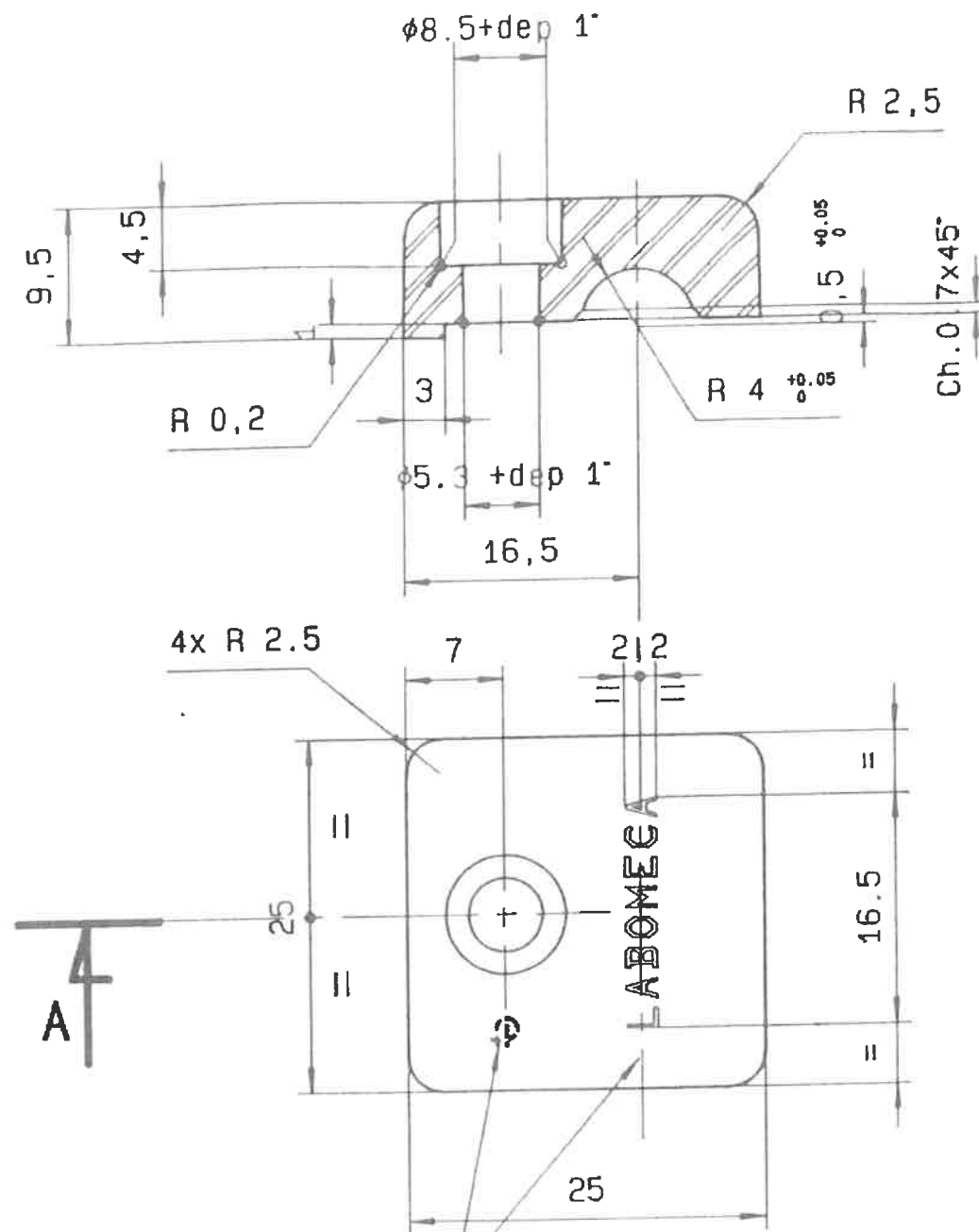

Sigle
hauteur 2.2, relief 0.3

Sigle fondeur
hauteur 2, relief 0.3
sur face du dessous.



Ech: 1

C/ PLAN REFAIT LE 25.04.94 EK		Controlé:	
Modif. :		Ech: 2/ 1	
Protec. : NICKELAGE BRILLANT	Tol. Gle.: j13 J13	code: P	
Matière: ZA4G (ZAMAK)		Date: 25.04.94	
COUVERCLE DE 8 NOIX DE 8X12		P7974222	
VWR International S.A.S.		C 50080	
Dessiné: KOUTCHENKOFF		Date: 25.04.94	
VWR, Part of Avantor		Date: 25.04.94	
Z.I. de Vaugereau		Date: 25.04.94	
F-45250 BRIARE		Date: 25.04.94	