E3 CORTEX

www.e3cortex.fr

FICHE TECHNIQUE

Réf : 3BIO000918	Récipient Biotainer 0.25L	Indice : 3

CARACTERISTIQUES

Présentation :

Le conteneur BIOTAINER 0,25L est un récipient secondaire étanche de conditionnement pour transfert de produits infectieux de la classe 6.2.
Il peut être associé soit :

- À son emballage tertiaire, ensemble homologué pour répondre aux exigences de l'instruction P620(ADR) et 620(IATA),
- À des emballages extérieurs de type sacoche pour répondre aux exigences de l'instruction P650(ADR) et 650(IATA).

Agréments :

Le récipient BIOTAINER est certifié conforme au test de pression différentielle 95kPa.

Le certificat d'agrément est disponible sur simple demande.

Composition :

- Un pot (tube)
- Un couvercle avec son joint

Aménagement :

- Absorbant
- Calage (portoir tube) en Option

Qualité des matériaux :

- Pot (Tube) : Plastique PP autoclavable (à 121°C / 30 min)
- Joint: Plastique PE non autoclavable
- Bouchon: Plastique PEHD non autoclavable

Caractéristiques :

Référence	3BIO000918
Dimensions extérieures	Ø63 x 194mm
Dimension intérieures	∅40 x 185mm
Masse à vide	0,104 Kg

VUE D'ENSEMBLE





Propriétés :

Le BIOTAINER permet le transfert de produits infectieux. Sa conception en fait un emballage à la fois petit, résistant, permettant une mise en œuvre très simple et très rapide.

Informations :

Le BIOTAINER a subi avec succès les tests de qualification requis par la réglementation. Il doit être utilisé avec l'ensemble de ses éléments constitutifs pour être conforme à sa certification.


⚠ IMPORTANT : ⚠
NE JAMAIS METTRE DE GLACE SECHE (GLACE CARBONIQUE, DIOXYDE DE CARBONE SOLIDE) A L'INTERIEUR DES RECIPIENTS.

E3 CORTEX

www.e3cortex.fr

FICHE TECHNIQUE

Réf : 3BIO000932 / 3BIO000918	Récipient Biotainer 0.25L	Indice : 3

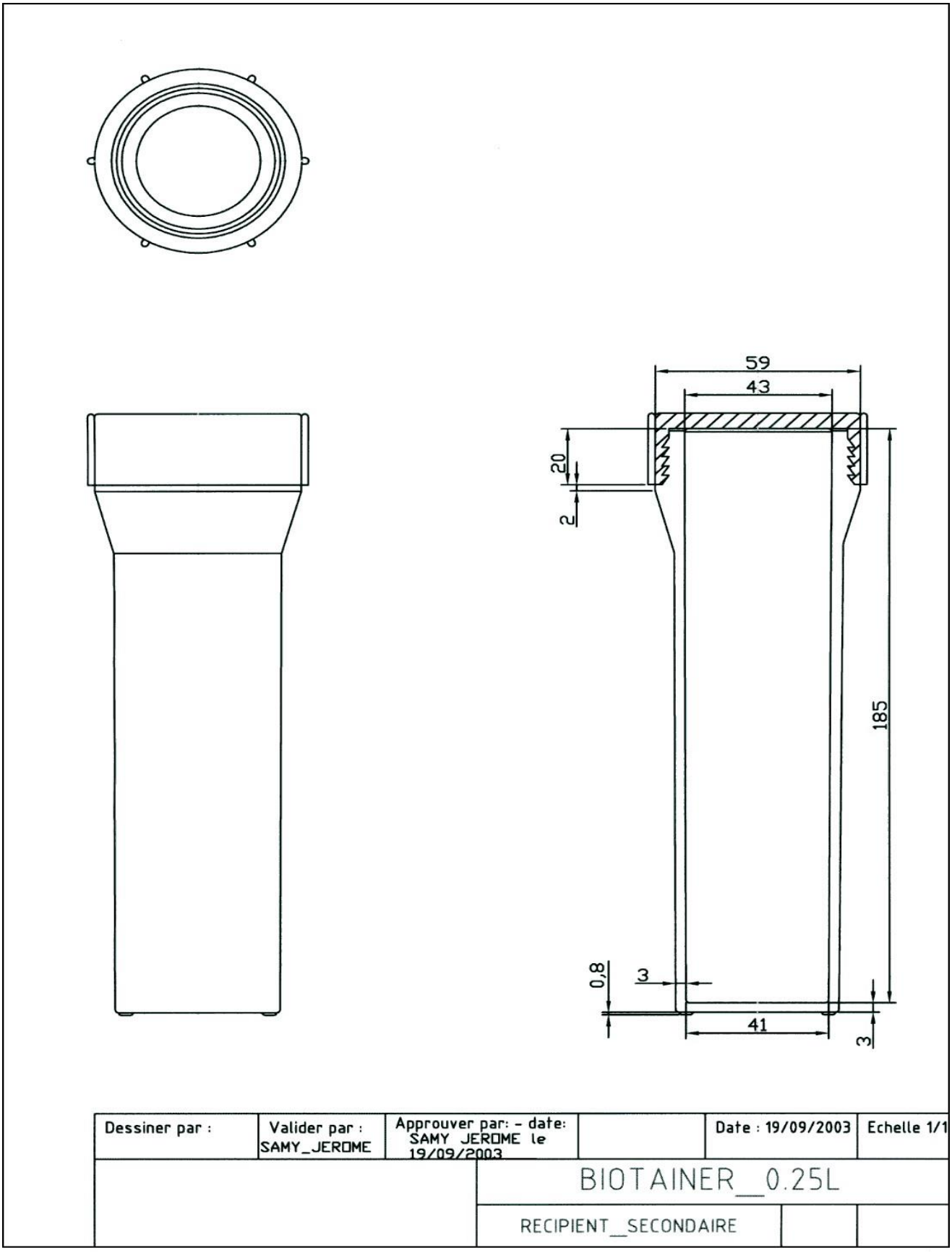

Rédacteur : W Richard	Date : 19/11/2014	Visa : WR	EQR04 /Fichtech 01D
Modifié par : S.Mechernene	Date : 10/05/2022	Visa : SM	
Approbateur : A PASCAL	Date : 10/05/2022	Visa : AP	