FR– Mode d'emploi

Quickspot et porte-lames Q Path®

CE IVD

PRODUITS APPLICABLES

REF

Description	Taille Pack.	Catégorie Numéro
Porte-lames Q Path® pour Turbitec®	PCES	**630-2093**
QuickSpot Q Path® pour Turbitec®	Boîte de 500 PCES	**630-2094**

USAGE PRÉVU

On utilise ce produit comme accessoire de centrifugation permettant de réaliser la cytocentrifugation d'échantillons prélevés dans l'organisme humain. Ce produit doit exclusivement être utilisé pour permettre à des cellules en suspension de se déposer sur une lame, et il permet de préparer des analyses diagnostiques. Il est prévu pour être utilisé dans un laboratoire avec des professionnels de santé. La population de patients à laquelle ce produit est destiné à des patients humains qui ont besoin de ce type d'examen.

COMPOSITION

Ce produit est constitué d'un mélange d'éléments en plastique.

PRINCIPE DE BASE

Cette unité constituée de trois éléments : le porte-lames Q Path® porte-lames, le Q Path® QuickSpot pour Turbitec® et la lame permettent aux cellules en suspension de se déposer sur la lame (échantillons gynécologiques, ou échantillons non gynécologiques dans un milieu liquide tels que de l'urine, etc.). Le Q Path® QuickSpot pour Turbitec® est une chambre de centrifugation à usage unique. Le volume de l'échantillonnage est limité à 8 ml par chambre. Cet appareil résiste à une exposition à l'alcool et à l'eau pendant quatre jours.

Le porte-lames Q Path® pour Turbitec® et le Q Path® QuickSpot pour Turbitec® ont été conçus pour être utilisés avec les centrifugeuses Hettich® (Rotofix, Rotina). Le porte-lames Q Path® et le Q Path® QuickSpot pour Turbitec® peuvent résister à une force centrifuge de 2039 g pendant 30 minutes.

RESTRICTIONS D'UTILISATION

Le porte-lames Q Path® pour Turbitec® sera en mesure de réaliser 600 tests. Il doit être désinfecté correctement à chaque utilisation. Le nombre d'utilisations possibles peut varier, en fonction de la manière dont l'équipement est entretenu.

ÉCHANTILLONS

On part du principe que ce produit doit être utilisé avec des échantillons de prélèvements cytologiques. Par conséquent, ce produit doit être utilisé en combinaison avec la centrifugeuse Hettich®.

PRÉPARATION DU RÉACTIF


Ne s'applique pas.

CONDITIONS DE STOCKAGE ET DURÉE DE CONSERVATION

Ne pas utiliser ce produit au-delà de la date de péremption imprimée sur l'étiquette. L'ouverture de l'emballage ne change rien à la date de péremption si les conditions de stockage définies sont respectées.

APPLICATION

1. Prendre le porte-lames Q Path® pour Turbitec®, un Q Path® QuickSpot pour Turbitec® et une lame en verre (lame standard, lame pré-traitée, etc.)
2. Insérer la lame dans le « porte-lame »
3. Il faut utiliser son pouce pour maintenir/retenir la lame dans son support, afin d'empêcher la lame de ressortir lorsqu'on fixe le QuickSpot au porte-lames
4. Prendre le QuickSpot, le placer au centre du porte-lames et lui faire décrire un quart de tour dans le sens horaire afin de fixer l'unité

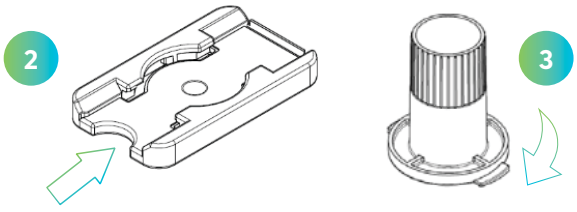

5. Pipeter un échantillon, et placer ce dernier dans le Q Path® QuickSpot pour Turbitec®. Pour connaître la quantité d'échantillon qui doit être pipetée, il faut tenir compte du type d'analyse que vous réalisez. → Le QuickSpot dispose de plusieurs graduations : 1,5 ml, 4,5 ml et 7,5 ml
6. Placez votre porte-lames et l'unité QuickSpot dans votre centrifugeuse
7. Vérifiez l'équilibre de l'ensemble
8. Centrifugez les échantillons (contrôler la durée et la vitesse de centrifugation, en fonction des analyses que vous souhaitez effectuer)
9. Éliminez le surnageant une fois la centrifugation terminée
10. Laissez le liquide restant s'évaporer avant de démonter le QuickSpot
11. Il faut utiliser son pouce pour maintenir/retenir la lame dans son support, afin d'empêcher la lame de ressortir lorsqu'on démonte le QuickSpot

Internal Use ONLY

 VWR International S.A.S., Immeuble Estréo, 1-3 rue d'Aurion, 93114 ROSNY-SOUS-BOIS CEDEX, France, +33(0)1 45 14 85 00, avantorsciences.com

12. Démontez le QuickSpot en le faisant tourner dans le sens anti-horaire
13. Retirez la lame du porte-lame
14. Si nécessaire, laisser le liquide encore restant sur la lame s'évaporer
15. Colorez les lames de la manière appropriée

MISE AU REBUT

Éliminez conformément aux lois et réglementations en vigueur.

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS

1. Le porte-lames est un accessoire réutilisable
2. Le QuickSpot est à usage unique
3. Ces deux accessoires ont été conçus pour être utilisés avec les centrifugeuses Hettich®
4. Suivre les instructions d'assemblage
5. Respectez les volumes de remplissage maximaux
6. Il faut porter des gants lorsqu'on manipule des accessoires et des échantillons
7. Respectez les conditions de stockage du porte-lames et du QuickSpot pour Turbitec®

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ

Nous accordons une attention toute particulière à la qualité de vos produits. Si l'un de nos produits venait à dysfonctionner ou si vous n'en étiez pas satisfait, veuillez remplir le formulaire de réclamation situé sur la page Contact de votre site web local **vwr.com** et indiquer la référence et le numéro de lot du produit concerné.

Nous attirons l'attention des utilisateurs sur les risques possibles en lien avec une utilisation du produit différente des fins auxquelles il est destiné. Le mode d'emploi ne dispense pas l'utilisateur de connaître et d'appliquer l'ensemble des informations qui réglementent son activité. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de prendre les précautions nécessaires relatives à l'utilisation qu'il fait de ce produit.

SYMBOLES UTILISÉS

Symbole	Titre et description du symbole	Symbole	Titre et description du symbole	Symbole	Titre et description du symbole
CE	Marquage de conformité CE	IVD	Dispositif médical pour diagnostic in vitro		Ne pas réutiliser
REF	Référence catalogue	QTY	Quantité de produit dans la boîte		Attention
	Fragile, à manipuler avec soin		Fabricant		Limite de température
	Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé	UDI	Identification unique du produit	PT	Fabriqué au Portugal
	Consultez la notice d'utilisation		Date de fabrication		À conserver au sec
	À utiliser avant	LOT	Code de lot		À protéger des rayons du soleil

JOURNAL DES MODIFICATIONS

Les informations présentes dans cette notice d'utilisation ont été rassemblées en mai/juin 2023 et remplacent l'ensemble des notices précédentes. Ces informations se basent sur nos connaissances et notre expérience actuelles.

Version 03

Modifications portant sur la version la plus récente de l'IFU :

- Mise à jour globale de la mise en page
- Corrections mineures et clarifications

CONTACT

VWR International S.A.S.
Immeuble Estréo - 1-3 rue d'Aurion, 93114 ROSNY-SOUS-BOIS CEDEX, France - SRN : FR-MF-000016509
+33(0)1 45 14 85 00
info.fr@vwr.com
www.avantorsciences.com

Tout incident grave qui serait survenu en lien avec ce produit doit être signalé au fabricant et aux autorités compétentes de l'État-Membre où l'utilisateur et/ou le patient réside.

Internal Use Only