FR– Mode d'emploi

Milieux de montage Q Path®

CE IVD

PRODUITS APPLICABLES

Description	Format d'emballage	QTY / REF Catégorie Numéro
Safemount Q Path®	500 ml	**00647520**

USAGE PRÉVU

On utilise ce produit en tant que moyen de montage en vue d'examiner des échantillons prélevés sur l'organisme humain. Ce produit doit exclusivement être utilisé pour procéder à des examens cytologiques et histologiques, et il permet de préparer des analyses diagnostiques. Il est prévu pour être utilisé dans un laboratoire avec des professionnels de santé. La population de patients à laquelle ce produit est destiné est constituée de patients humains qui ont besoin de ce type d'examen.

COMPOSITION

Le produit est constitué d'hydrocarbures aliphatiques (< 75 % m/v), et de résines (> 25 % m/v).

PRINCIPE DE BASE

Sa composition permet un montage simple et efficace de verre de couverture. Il remplace les réactifs de montage à base de solvants cycliques dangereux. Son principe de base repose sur une réaction physique au contact de l'air, car ce dernier durcit l'environnement de montage et permet au verre de couverture d'adhérer à la lame. Il est possible d'éliminer facilement l'excès de Q Path® Safemount à l'aide d'un chiffon. Ces caractéristiques physico-chimiques font qu'il s'étale facilement. Il est indispensable d'utiliser Q Path® Safemount en même temps que Q Path® Safesolv. Pour obtenir une sensibilité plus importante ou plus faible, afin de procéder à un séchage rapide en fonction de la viscosité du produit désirée, il est possible de diluer Q Path® Safemount à l'aide de Safesolv, un solvant prévu à cet effet.

RESTRICTIONS D'UTILISATION

Pour connaître les limites de performances, il faut tenir compte de la technique utilisée.

ÉCHANTILLONS


On part du principe que ce produit doit être utilisé avec des échantillons permettant d'analyser des prélèvements cytologiques et histologiques. État spécifique des échantillons : échantillons frais, correctement fixés. Pré-traitement : L'échantillon a été déshydraté (lors du processus d'inclusion dans de la paraffine), puis réhydraté (lors de la coloration) dans Safesolv. Conditions de stockage : Montez une lame/un verre de couverture, à maintenir dans un endroit sec, à l'abri de la lumière directe.

PRÉPARATION DU RÉACTIF

Ce réactif est prêt à l'emploi, et on peut le prélever directement de son récipient ; aucune préparation spécifique du réactif n'est nécessaire.

CONDITIONS DE STOCKAGE ET DURÉE DE CONSERVATION

Le flacon de produit doit être bien refermé après usage et conservé debout, à l'abri de la lumière directe, et dans un lieu bien ventilé. La date de péremption doit être clairement indiquée sur l'emballage.

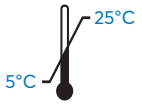

Ne pas utiliser ce réactif au-delà de la date de péremption imprimée sur l'étiquette.

APPLICATION

1. Appliquez une quantité suffisante de Q Path® Safemount sur la lame afin de recouvrir l'échantillon.
2. Placez le verre de couverture sur celui-ci afin d'éviter la formation de bulles.
3. À l'aide d'un papier, éliminez l'excès de Path® Safemount.
4. Laissez sécher les lames.
5. Lire sous un microscope.

MISE AU REBUT

Éliminez conformément aux lois et réglementations en vigueur.

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS

	H226 : Liquide et vapeurs inflammables.
	H304 : Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
	EUH066 : L'exposition répétée peut provoquer dessèchement et gerçures de la peau.
CONSEILS DE PRUDENCE	P210 : Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
	P243 : Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
	P280 : Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
RÉPONSE	P301+P330+P331 : EN CAS D'INGESTION : Rincer la bouche. Ne pas provoquer de vomissements.
	P308+P310 : EN CAS D'EXPOSITION PROUVÉE OU SUSPECTÉE : Appelez un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
	P403+P235 : Stockez dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
	À usage unique exclusivement. Jetez le produit après l'usage.

VWR International S.A.S., Immeuble Estréo, 1-3 rue d'Aurion, 93114 ROSNY-SOUS-BOIS CEDEX, France,+33(0)1 45 14 85 00, avantorsciences.com

1. Toute modification est effectuée aux risques et périls de l'utilisateur.
2. Montez les lamelles sous un ventilateur.
3. Ne pas utiliser Q Path® Safemount avec des produits autres que Q Path® Safesolv.
4. Veillez à appliquer une quantité suffisance de produit sur la lame afin d'empêcher le verre de couverture de se retirer.
5. Une fois montées, les lames doivent être conservées (ou éliminées) dans un endroit approprié (ou des récipients adaptés).

Pour obtenir de plus amples informations, veuillez vous reporter à la fiche de données de sécurité.

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ

Nous accordons une attention toute particulière à la qualité de nos produits. Si l'un de nos produits venait à dysfonctionner, et si vous n'en étiez pas satisfait, veuillez remplir le formulaire de réclamation situé sur la page Contact de votre site web local **vwr.com** et indiquez la référence et le numéro de lot du produit concerné.

Nous attirons l'attention des utilisateurs sur les risques possibles en lien avec une utilisation du produit autres que les fins auxquelles il est destiné. Le mode d'emploi ne dispense pas l'utilisateur de connaître et d'appliquer l'ensemble des informations qui réglementent son activité. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de prendre les précautions nécessaires relatives à l'utilisation qu'il fait de ce produit.

SYMBOLES UTILISÉS

Symbole	Titre et description du symbole
CE	Marquage de conformité CE
REF	Référence catalogue
	Fragile, à manipuler avec soin
	Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé
	Consultez la notice d'utilisation
	À utiliser avant

Symbole	Titre et description du symbole
IVD	Dispositif médical pour diagnostic in vitro
QTY	Quantité de produit dans la boîte
	Fabricant
UDI	Identification unique du produit
	Date de fabrication
LOT	Code de lot

Symbole	Titre et description du symbole
	Ne pas réutiliser
	Attention
	Limite de température
PL	Fabriqué en Pologne
	À conserver au sec
	À protéger des rayons du soleil

JOURNAL DES MODIFICATIONS

Cette notice d'utilisation a été élaborée en mai/juin 2023 et remplace l'ensemble des notices précédentes. Ces informations se basent sur nos connaissances et notre expérience actuelles.

Version 06

Modifications portant sur la version la plus récente de l'IFU :

- Mise à jour globale de la mise en page
- Corrections mineures et clarifications

CONTACT

VWR International S.A.S.
Immeuble Estréo
1-3 rue d'Aurion, 93114 ROSNY-SOUS-BOIS CEDEX, France
SRN : FR-MF-000016509
+33(0)1 45 14 85 00
info.fr@vwr.com
www.avantorsciences.com

Tout incident grave qui serait survenu en lien avec ce produit doit être signalé au fabricant et aux autorités compétentes de l'État-Membre où l'utilisateur et/ou le patient réside.